








Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

# Attends Slip Active ist geeignet für mobile aktive Personen mit starker Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

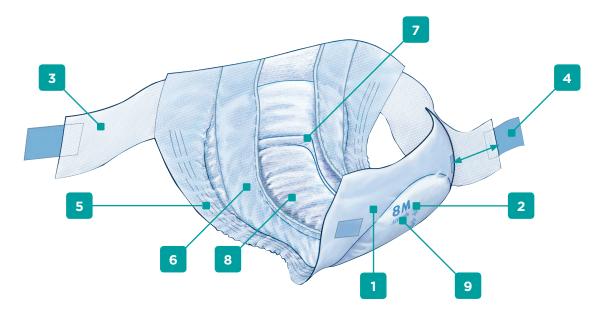

- Weiße flüssigkeitundurchlässige Außenseite als Auslaufschutz.
- Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschwimmen an, wann das Produkt gewechselt werden muss.
- Die atmungsaktiven textilartigen Seitenflügel lassen mehr Luft an die Haut. Das trägt zur Hautgesundheit bei.

- Durch den innovativen 2-Schritt-Verschluss lässt sich der Slip Active leicht und schnell anlegen. Mit Hilfe des Klettverschlusses den Slip vorfixieren, bei Bedarf korrigieren, dann mit den breiten Klebestreifen verschließen.
- Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz.
- Auslaufsperren sorgen für bestmöglichen Auslaufschutz.

- Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.
- Leistungsstarker Saugkern für verbesserten Auslaufschutz, optimale Hauttrockenheit und Geruchsbindung.
- Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt.

www.attends.de

www.attends.at

www.attends.ch

| Attends* Slip Active  Absorption / Größe |                               | Stück / Beutel<br>Stück / Karton<br>Stück / Palette | EAN 7332152<br>Packung / Karton | PZN<br>Packung/Karton | Hilfsmittelpositionsnummer | Bauch- / Hüftumfang<br>in cm | Außenseite Material | Saugkern Material                                                                       | Innenseite Material | Atmungsaktiv              | Elastische Seitenbündchen | Auslaufsperren | Wiederverschließbares<br>Fixiersystem | Geruchsbindung (Odour Protection) | Quick-Dry Technologie |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 8                                        | Attends Slip Active<br>Medium | 28<br>4 x 28<br>24 x 4 x 28                         | 200728<br>200735                | 2525273<br>2534906    | 15.25.03.1215              | 75 - 110                     | Poly-<br>ethylen    | 2-facher Saugkern mit<br>Zellstoff, Superab-<br>sorber und Quick-Dry<br>Aufnahmeschicht | Vlies               | Ja -<br>Seiten-<br>flügel | ✓                         | <b>√</b>       | ✓                                     | <b>✓</b>                          | 1                     |
|                                          | Attends Slip Active<br>Large  | 28<br>4 x 28<br>16 x 4 x 28                         | 201329<br>201336                | 2553944<br>2553950    | 15.25.03.2233              | 100 - 145                    | Poly-<br>ethylen    | 2-facher Saugkern mit<br>Zellstoff, Superab-<br>sorber und Quick-Dry<br>Aufnahmeschicht | Vlies               | Ja -<br>Seiten-<br>flügel | 1                         | 1              | 1                                     | ✓                                 | 1                     |
| 9                                        | Attends Slip Active<br>Medium | 28<br>4 x 28<br>24 x 4 x 28                         | 201503<br>201510                | 2553967<br>2883973    | 15.25.03.1216              | 75 - 110                     | Poly-<br>ethylen    | 2-facher Saugkern mit<br>Zellstoff, Superab-<br>sorber und Quick-Dry<br>Aufnahmeschicht | Vlies               | Ja -<br>Seiten-<br>flügel | 1                         | 1              | 1                                     | ✓                                 | 1                     |
|                                          | Attends Slip Active<br>Large  | 28<br>4 x 28<br>16 x 4 x 28                         | 201381<br>201398                | 2553996<br>2554004    | 15.25.03.2234              | 100 - 145                    | Poly-<br>ethylen    | 2-facher Saugkern mit<br>Zellstoff, Superab-<br>sorber und Quick-Dry<br>Aufnahmeschicht | Vlies               | Ja -<br>Seiten-<br>flügel | 1                         | 1              | 1                                     | ✓                                 | 1                     |
| 10                                       | Attends Slip Active<br>Medium | 28<br>4 x 28<br>24 x 4 x 28                         | 201404<br>201411                | 2554010<br>2554027    | 15.25.03.1217              | 75 - 110                     | Poly-<br>ethylen    | 2-facher Saugkern mit<br>Zellstoff, Superab-<br>sorber und Quick-Dry<br>Aufnahmeschicht | Vlies               | Ja -<br>Seiten-<br>flügel | ✓                         | ✓              | 1                                     | ✓                                 | 1                     |
|                                          | Attends Slip Active<br>Large  | 28<br>2 x 28<br>36 x 2 x 28                         | 201428<br>201435                | 2585329<br>2717050    | 15.25.03.2235              | 100 - 145                    | Poly-<br>ethylen    | 2-facher Saugkern mit<br>Zellstoff, Superab-<br>sorber und Quick-Dry<br>Aufnahmeschicht | Vlies               | Ja -<br>Seiten-<br>flügel | ✓                         | <b>√</b>       | ✓                                     | ✓                                 | 1                     |



## Quick-Dry

Die Quick-Dry Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt die Flüssigkeit schnell auf und leitet sie von der Haut weg in den eigentlichen Saugkern. Dort wird die Flüssigkeit sicher gebunden und eingeschlossen. Das Produkt kann auf diese Weise mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen. Dies sorgt für Hauttrockenheit und Auslaufschutz auch bei längeren Tragezeiten.



### pH-Wert

Das Quick-Dry-System mit Aktivfasern und Superabsorber sorgt für einen guten pH-Wert von 4,5. Somit unterstützt Attends die Hautgesundheit.



#### Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch werden unangenehme Gerüche vermieden.



#### **Active Zone**

Die Active Zone im Schrittbereich sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt for optimale Hauttrockenheit und vorbildlichen Auslaufschutz.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Slip Active ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.