

DESCO WIPES DT KLEIN

Vliestücher zur Tränkung
mit Flächendesinfektionsmitteln

- zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln
- wiederbefüllbares Spendersystem
- optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche

Die hygienisch
einwandfreie Lösung!



CE

PRÄPARATETYP

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen in medizinischen Bereichen und Medizinprodukten. Die Tücher sind aus qualitativ hochwertigem, fussellosem Vliesstoff. Auf Grund der quervernetzten Vliesstruktur sind **DESCO WIPES DT KLEIN** sehr strapazierfähig und besonders reißfest. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden.

DESCO WIPES DT KLEIN wurden **speziell für die Flächen-desinfektion in patientennahen und hygienisch sensiblen Bereichen entwickelt**. Sie geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Fläche.

DESCO WIPES DT KLEIN können aus einem eigens dafür konzipierten **DESCO WIPES FEUCHTTUCHSPENDER KLEIN** entnommen werden. Die Entnahme erfolgt aus einem sehr praktikablen, wiederverschließbaren Spendersystem. Die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt.

DESCO WIPES FEUCHTTUCHSPENDER KLEIN

Ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spendereimer aus Polyethylen und Polypropylen. Die Entnahme erfolgt aus einem speziell für diese Anwendung konzipierten, absolut dichten, wiederverschließbaren Tuchspendersystem.

Spülmaschinenfest bis 60° C.

Ein spezielles Etikett, welches die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum erleichtert, ist jedem Vliestuchspender beigelegt.

ANWENDUNG

1,0 – 1,5 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen).

Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spendereimer mit 1,0 – 1,5 Litern der Gebrauchslösung des Desinfektionsmittelkonzentrats oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels.

Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen.

Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!

Die **Standzeit** wurde für unsere Flächendesinfektionsmittelkonzentrate in den von der DGHM/ÖGHMP empfohlenen Konzentrationen untersucht. Zu dem wurde die Standzeit unserer gebrauchsfertigen alkoholischen Schnelldesinfektionsmitteln untersucht. Die Standzeiten betragen jeweils mindestens 28 Tage.

Neben den Flächendesinfektionsmitteln von Dr. Schumacher können **DESCO WIPES DT KLEIN** auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Bitte Herstellerangaben zur Stabilität der Flächendesinfektionsmittel beachten.

DESCO WIPES DT KLEIN sind einzeln abreißbar und sollten einzeln aus der Applikationsöffnung entnommen werden. Nachfolgende Tücher sind durch die große Auffangschale mit Deckel des Spendersystems sicher geschützt.

Spezielle Etiketten, die die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum des entsprechenden Desinfektionsmittels erleichtern, sind jeder Vliesrolle beigelegt. Vliestuchspendersystem nicht unmittelbaren Wärmequellen aussetzen. Weitere ausführliche Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte unserem separat erhältlichen **DESCO WIPES** Flyer.

ANWENDUNG:

BEFÜLLEN DES
DESCO WIPES
VLIESTUCHSPENDERS



DR. SCHUMACHER GMBH
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM

DESCO WIPES DT KLEIN

Vliestücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln

ANWENDUNGSBEREICHE

DESCO WIPES DT KLEIN können zur Flächendesinfektion und Reinigung in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen, der pharmazeutischen Industrie, in Labors sowie in der Lebensmittelindustrie und Küchen angewendet werden.

Sie sind besonders geeignet für:

- patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Patientenliegen, insbesondere in Isolierzimmern z.B. bei MRSA-Patienten.
- alle Arbeitsflächen
- Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluß zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist
- schwer zugängliche Flächen

ZUSAMMENSETZUNG

1 Rolle besteht aus 70 Wischtüchern à 25 cm x 25 cm, trocken, aus hochqualitativem, fussellosem Spunlace-Lochvlies. 100% Kunstfaser-Mischung.

LIEFERFORMEN


Einzelpackung	VK-Einheit	PZN	Art.-Nr.
1 Packung Desco Wipes DT klein Rolle à 70 Blatt	3 x 1 Rolle	-	00-915-RD7003
Desco Wipes Feuchttuchspender klein 1 Spendereimer	1 x 1 Eimer	-	00-915-EK004
Desco Wipes Feuchttuchspender klein Vorratspackung 6 Spendereimer	6 x 1 Eimer	-	00-915-EK005

UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.

APPLIKATIONSHILFEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
Desco Wipes Wandhalter klein	1 x 1 Halter	0792320	00-902-EIMK

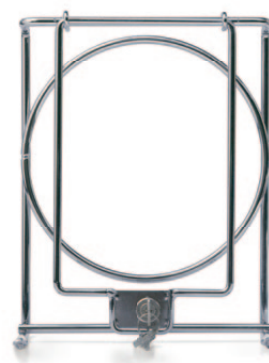

GUTACHTEN

Prof. Werner, Hygieniker, Schwerin:
Prüfung der desinfizierenden Wirksamkeit und Standzeit von **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **CLEANISEPT, BIGUANID FLÄCHE N, OPTISAL N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT PUR** und **DESCOSEPT SPEZIAL** gem. 4-Felder-Test.

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **CLEANISEPT, BIGUANID FLÄCHE N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT PUR, OPTISAL N, Terralin Protect** und **Incidin Plus** im **DESCO WIPES SYSTEM**.

Desinfizierende Wirkung von **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESCOSEPT PUR, CLEANISEPT, DESCOSEPT AF** und **BIGUANID FLÄCHE N**.

Desinfizierende Wirkung von **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESOMED RAPID AF**. Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESOMED RAPID AF** und **BIGUANID PERFEKT N** im **DESCO WIPES SYSTEM**.

Dr. Schumacher GmbH, Melsungen:
Eignung des Vliestuchmaterials von **DESCO WIPES DT** zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln.

B.Braun Melsungen AG:
Stellungnahme zur Kompatibilität von B.Braun-Flächendesinfektionsmitteln in Verbindung mit **DESCO WIPES**.

PRODUKTSTATUS

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.



DR. SCHUMACHER GMBH
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM